

Your practice is *our* inspiration.™

NX3 | Perfección en cementos permanentes



NX3

Definiendo una nueva generación en cementos definitivos

NX3 es un cemento definitivo a base de resina con una química innovadora, que nos brinda sin igual excelencia en estética, adhesión y versatilidad. Los sistemas de dispensación incluyen: Jeringa auto-mezcladora para cuando se requiere curado dual y una Jeringa de cemento de fotocurado, con tiempo de trabajo ilimitado. NX3 puede ser utilizado para todo tipo de restauraciones indirectas, incluyendo CARILLAS.


*Inspirada por:
Estabilidad de color,
fácil manejo y limpieza,
excelente coloración y
óptima retención, son
algunos de los atributos
que se tienen en cuenta
a la hora de seleccionar
un cemento. NX3
cumple con todas estas
expectativas..*

- Mitch A. Conditt, DDS



Investigación

La mayoría de cementos resinosos auto-curados o de curado dual, usan peróxido de benzoilo y aminas terciarias para inicializar la polimerización y curado, resultando en decoloración a largo plazo debido a la incompatibilidad con los adhesivos auto-grabadores. Ahora NX3 libre de aminas, con un sistema iniciador REDOX y una matriz optimizada, es el primer cemento adhesivo de resina con una VERDADERA estabilidad de color y compatibilidad mejorada con los sistemas adhesivos de grabado total o auto-grabadores.

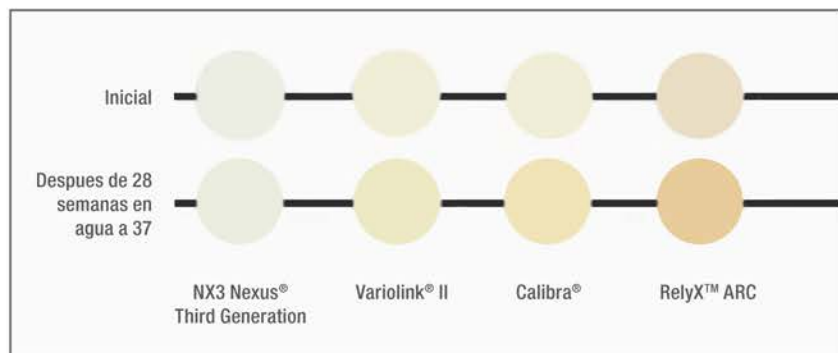


Trademarks are property of their respective owners.

Características

Adhesión superior. Se adhiere a todos los sustratos. Excelente adhesión a dentina, esmalte, cerámica, CAD/CAM, resinas indirectas y metal.

Auto Grabado o Grabado Total. Compatible con los dos protocolos de adhesión. No requiere un activador dual.

Verdadera estabilidad de Color. Estética duradera y estable en cualquiera de los sistemas de curado, DUAL y FOTOCURADO.

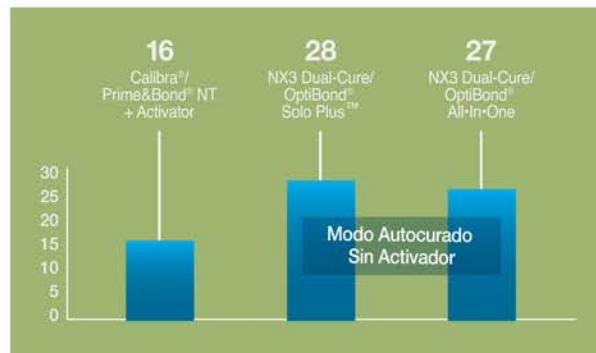

Estudio realizado por Dr. James Dunn of Loma Linda University

Presentaciones

33642B NX3 Nexus Intro Kit

Contiene: 1 Jeringa dual 5gr. de cada color: clear, blanco y amarillo, 1 Jeringa fotocurada 1.8gr. de cada color: clear, blanco y amarillo, 1 Jeringa glicerina de prueba 3gr. de cada color: clear, blanco y amarillo, 1 Frasco 5ml. Silano, 30 puntas de automezcla, guía técnica e instructivo.

33682 NX3 Nexus Kit Fotocurado

Contiene: 1 Jeringa Fotocurada 1.8gr. de cada color: clear, blanco y amarillo, 1 Jeringa glicerina de prueba 3gr. de cada color: clear, blanco y amarillo, 10 unidades de Optibond Solo plus, 1 Frasco 5ml. Silano, 10 puntas de automezcla, 1 jeringa 3gr. ácido graba.

NX3 Automix Dual-Cure Syringe Refills

- 33643 Clear
- 33644 White
- 33645 Yellow
- 33646 Bleach
- 33647 White Opaque

NX3 Light-Cure Syringe Refills

- 33648 Clear
- 33649 White
- 33650 Yellow
- 33651 Bleach
- 33652 White Opaque

NX3 Try-In Gel Syringe Refills

- 33656 Clear
- 33657 White
- 33658 Yellow
- 33659 White Opaque
- 33660 Bleach
- 33655 50 Automix Tips

© 2012 Kerr Corporation
Las marcas registradas son propiedad de Kerr Company.

Contacto:

T. (55) 52 80 78 51 / 01800 2205 377
www.intl.kerrdental.com

